


How to reinstall or upgrade LB120


A. Double click "This PC" from desktop



B. Press “Uninstall or change program”

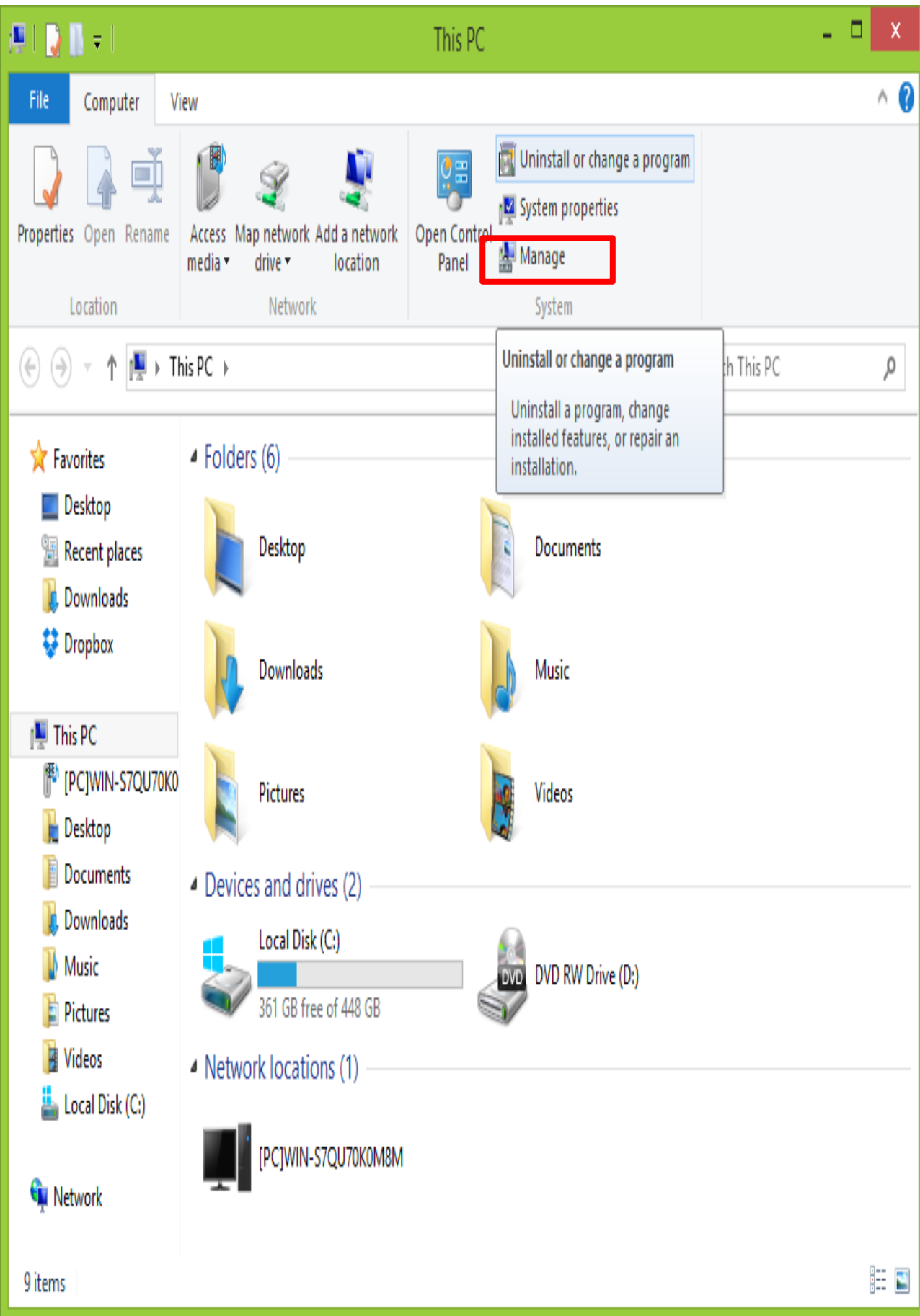

C. Select the program and press “Uninstall”

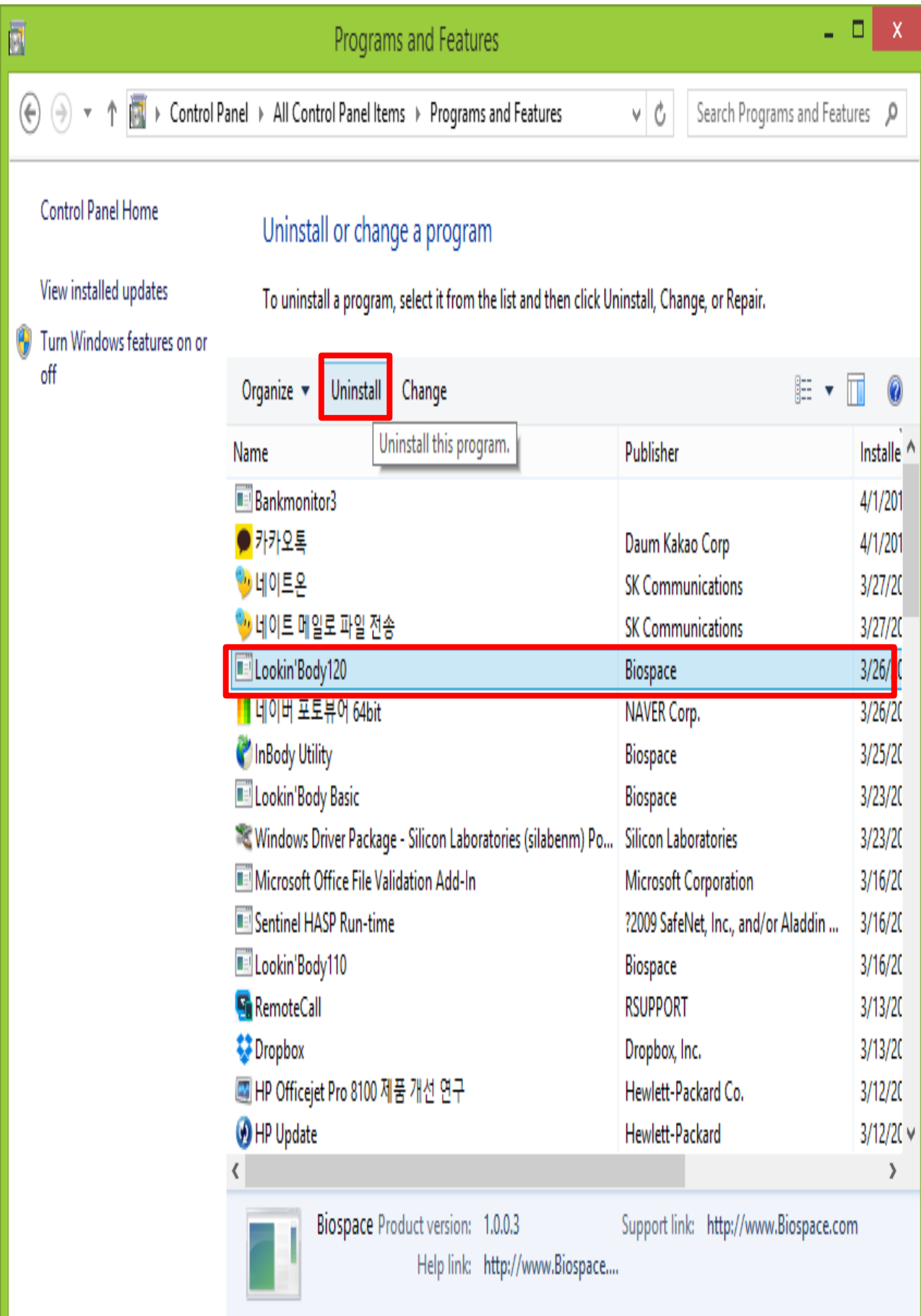

Control Panel Home

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

View installed updates

Turn Windows features on or off

Organize ▾ **Uninstall** Change

Name	Publisher	Installed
Bankmonitor3		4/1/2011
카카오톡	Daum Kakao Corp	4/1/2011
네이트온	SK Communications	3/27/2011
네이트 메일로 파일 전송	SK Communications	3/27/2011
Lookin' Body120	Biospace	3/26/2011
네이버 포토뷰어 64bit	NAVER Corp.	3/26/2011
InBody Utility	Biospace	3/25/2011
Lookin' Body Basic	Biospace	3/23/2011
Windows Driver Package - Silicon Laboratories (silabnm) Po...	Silicon Laboratories	3/23/2011
Microsoft Office File Validation Add-In	Microsoft Corporation	3/16/2011
Sentinel HASP Run-time	?2009 SafeNet, Inc., and/or Aladdin ...	3/16/2011
Lookin' Body110	Biospace	3/16/2011
RemoteCall	RSUPPORT	3/13/2011
Dropbox	Dropbox, Inc.	3/13/2011
HP Officejet Pro 8100 제품 개선 연구	Hewlett-Packard Co.	3/12/2011
HP Update	Hewlett-Packard	3/12/2011

Lookin' Body120 Product version: 1.0.0.3 Support link: <http://www.Biospace.com>
Help link: <http://www.Biospace.com>

D. Press "OK" to uninstall the program

설치 준비

InstallShield 마법사가 설치를 준비하는 동안 기다리십시오.

Lookin'Body120 설치 프로그램이 InstallShield Wizard 마법사를 준비중입니다. 잠시만 기다려 주십시오.

제거 확인

선택한 응용 프로그램과 모든 기능을 완전히 제거하시겠습니까?

OK

Cancel


InstallShield

취소

E. -Double Click "Local Disk(C:)"

The screenshot shows the Windows File Explorer interface for 'This PC'. The ribbon at the top includes 'File', 'Computer', 'View', and 'Manage' tabs. The ribbon contains icons for 'Properties', 'Open', 'Rename', 'Access media', 'Map network drive', 'Add a network location', 'Open Control Panel', 'Uninstall or change a program', 'System properties', and 'Manage'. The address bar shows 'This PC' and a search box labeled 'Search This PC'. The main area is divided into 'Folders (6)', 'Devices and drives (2)', and 'Network locations (1)'. The 'Local Disk (C:)' is highlighted with a red box, showing a progress bar and the text '361 GB free of 448 GB'. The 'DVD RW Drive (D:)' is also visible. The left sidebar shows 'Favorites' (Desktop, Recent places, Downloads, Dropbox) and 'This PC' (PC)WIN-S7QU70K0, Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos, Local Disk (C:), and Network. The bottom status bar indicates '9 items' and '1 item selected'.

F. Right Click the designated folder and press "Delete"

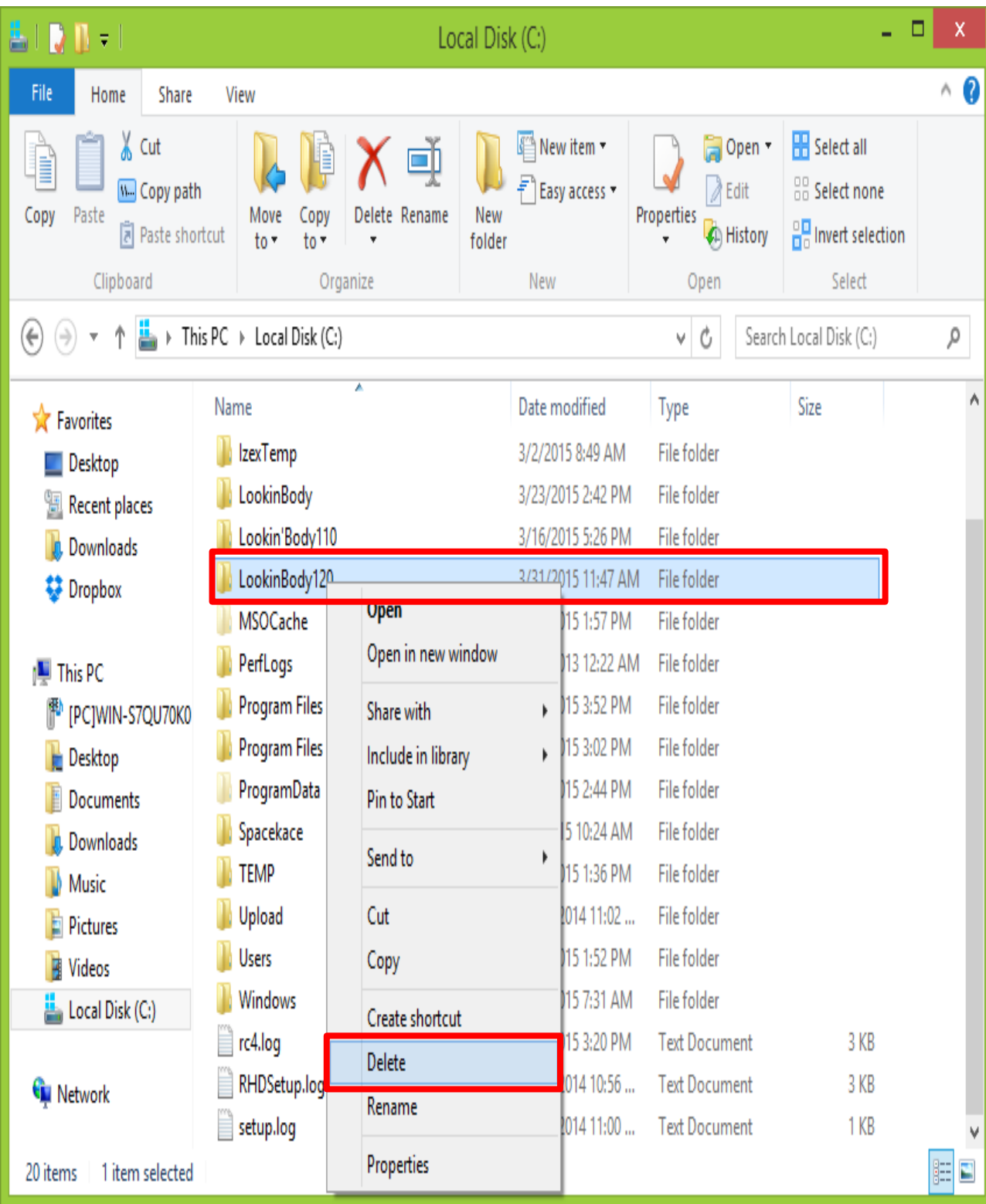

**Precaution: DB file will be also erased.
Please backup the DB**

G. Connect to Dropbox and download LB120

Dropbox > InBodyCS



Q 검색

이름 유형 수정된 날짜

이름	유형	수정된 날짜
InBody230	폴더	--
InBody370	폴더	--
InBody570	폴더	--
InBody770	폴더	--
InBodyS10	폴더	--
<u>Lookin'Body</u>	폴더	--
Miscellaneous	폴더	--
Training Guides	폴더	--
User Manuals	폴더	--

공유

<https://www.dropbox.com/home/InBodyCS>

H. Select "LB120" to find the "Installation Folder"

Dropbox > InBodyCS > Lookin'Body



🔍 검색

이름	유형	수정된 날짜
----	----	--------

.NET Framework	폴더	--
----------------	----	----

Accessory	폴더	--
-----------	----	----

Drivers	폴더	--
---------	----	----

LB 3.0	폴더	--
--------	----	----

LB 110	폴더	--
--------	----	----

LB 120	폴더	--
--------	----	----

LB Basic	폴더	--
----------	----	----

LB R20	폴더	--
--------	----	----

How to check LB S status.jpg	이미지	2014/8/22 오후 3:41일
------------------------------	-----	--------------------

Lookin'Body_LB R LB120.pdf	파일	2014/8/22 오후 1:21일
----------------------------	----	--------------------

I. Select "Installation File" to find the installation file

Dropbox for Business 평가판 사용



InBody CS Department ▾

> Lookin'Body > LB 120



검색

이름 ↕

유형

수정된 날짜



[Installation Files]

폴더

--



Bluetooth Connection with IB570

폴더

--



Complete Uninstallation and Reinstallation

폴더

--



Custom Logo Input

폴더

--



DB Backup Importation from IB570

폴더

--



Previous LB Data Importation

폴더

--



Wi-Fi Setup

폴더

--



Bluetooth Dongle (For InBody vs For PC).png

이미지

2015/2/12 오전 8:42일



Supported InBody Models (20150320).jpg

이미지

2015/3/20 오후 1:17일

J. Select the latest version of LB120



LB 120 > [Installation Files]



파일

사진

공유

링크

이벤트

다음 서비스 바로가기

Carousel

Mailbox

이름	유형	수정된 날짜
Lookin'Body120_Ver1.0.0.11_Setup.zip	압축 파일	2014/3/28 오전 8:43일
Lookin'Body120_Ver1.0.0.12_Setup.zip	압축 파일	2014/5/13 오전 7:35일
Lookin'Body120_Ver1.0.0.13_Setup.zip	압축 파일	2014/8/7 오후 3:47일
Lookin'Body120_Ver1.0.2.0_Setup.zip	압축 파일	2014/11/14 오후 7:00일
Lookin'Body120_Ver1.0.2.2_Setup.zip	압축 파일	2014/12/3 오후 7:04일
Lookin'Body120_Ver1.0.3.2_Setup.zip	압축 파일	2015/2/17 오후 6:40일
Lookin'Body120_Ver1.0.3.3_Setup.zip	압축 파일	2015/2/25 오전 11:19일
Lookin'Body120_Ver1.0.3.4_Setup.zip	압축 파일	2015/3/17 오후 2:08일
Lookin'Body120_Ver1.0.3.6_Setup.zip	압축 파일	2015/4/4 오전 1:39일

K. There will be a zip file on your Desktop



This PC



LookinBod...

L. Unzip the file and you a new folder will appear



M. Open the folder and start the installation

The screenshot shows a Windows Explorer window titled "Lookin'Body120_Setup". The ribbon includes "File", "Home", "Share", and "View". The ribbon tabs are "Clipboard", "Organize", "New", "Open", and "Select". The address bar shows the path "Lookin'Body120_Setup" and a search box. The left sidebar shows "Favorites" (Desktop, Recent places, Downloads, Dropbox) and "This PC" (This PC, [PC]WIN-S7QU70K0, Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos, Local Disk (C:), Network). The main pane displays a list of files and folders:

Name	Date modified	Type	Size
ISSetupPrerequisites	3/26/2015 1:29 PM	File folder	
Ox0409.ini	3/23/2010 4:44 PM	Configuration sett...	22 KB
Ox0411.ini	3/16/2012 12:55 PM	Configuration sett...	15 KB
Ox0412.ini	4/3/2012 2:44 PM	Configuration sett...	14 KB
Autorun.inf	9/30/2013 2:12 PM	Setup Information	1 KB
data1.cab	3/26/2015 10:48 AM	CAB File	1,034 KB
data1.hdr	3/26/2015 10:48 AM	HDR File	285 KB
data2.cab	3/26/2015 10:48 AM	CAB File	459,482 KB
ISSetup.dll	5/13/2014 9:10 AM	Application extens...	590 KB
layout.bin	3/26/2015 10:48 AM	BIN File	3 KB
Lookin'Body120_Setup.exe	3/17/2015 3:08 PM	Application	831 KB
setup.ini		File description: InstallScript Setup Launcher Unicode t...	4 KB
setup.inx		Company: Biospace	237 KB
setup.isn		File version: 1.0.0.3	55 KB
User's_Manual_eng.pdf		Date created: 3/26/2015 1:29 PM	7,091 KB
User's_Manual_kor.pdf	3/12/2014 3:29 PM	Adobe Acrobat D...	7,680 KB

The file "Lookin'Body120_Setup.exe" is highlighted with a red box. A tooltip is displayed over it, showing the following properties:

- File description: InstallScript Setup Launcher Unicode t...
- Company: Biospace
- File version: 1.0.0.3
- Date created: 3/26/2015 1:29 PM
- Size: 831 KB

At the bottom left, it says "16 items".

End of instructions.

Go back to Technician's troubleshooting steps.